

Návod na použití



Masážní přístroj na bederní páteř

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro náš masážní přístroj na bederní páteř. Tento návod k použití obsahuje důležité informace týkající se bezpečného používání přístroje. Proto si návod pečlivě prostudujte předtím, než začnete přístroj používat. Návod k použití si uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj není určen pro zdravotní masáže – slouží k provádění relaxačních masáží v domácím prostředí.

Rozsah dodávky




- ① Elektromagnetický čip
- ② Vibrační jednotka
- ③ Topný prstenec
- ④ Vzduchový trakční systém
- ⑤ Ovládací vedení
- ⑥ Ovládací panel
- ⑦ Základová deska

Příslušenství



Vstupní napětí: 100 - 240 V
Jmenovité napětí: 12 V DC
Jmenovitý výkon: 24 W
Jmenovitá síla proudu: 2 A

(Před zapojením napájecího zdroje do elektrické sítě musíte zkontrolovat, zda hodnoty proudu a napětí ve vaší zemi odpovídají hodnotám přístroje.)

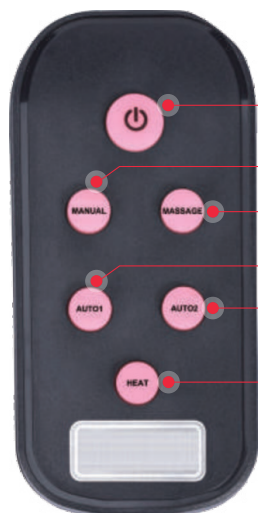


- ZAP/VYP
- Nafouknutí/
vyfouknutí
- Masáž
- Auto 1
- Auto 2
- Teplota

VLASTNOSTI A FUNKCE

- Infračervené světlo a tepelná terapie
- Nastavitelná úroveň teploty (Nízká / Střední / Vysoká)
- Vibrační masáž
- Obsahuje elektromagnetický čip
- Pohodlné použití díky ergonomickému, anatomickému tvaru
- Dmychadlový systém

UPOZORNĚNÍ

- U tepelné terapie infračerveným světlem je běžná doba ošetření 15 minut. Po 10minutové přestávce znovu stiskněte tlačítko ZAP/VYP na ovládacím panelu, pokud chcete spustit další masážní cyklus.
- V závislosti na provozním režimu mohou být zablokována tlačítka pro některé funkce. Pro více informací si prosím přečtete návod k použití.
- Tento přístroj je určen výhradně pro použití v dolní části zad.
- Nepoužívejte přístroj přímo na pokožku.
- Osoby trpící diabetem a zvýšenou citlivostí na teplo by měly přístroj používat obezřetně.

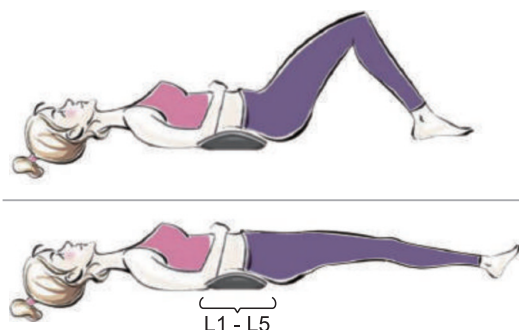

POLOHA PŘÍSTROJE PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Poloha přístroje při používání je u každého člověka jiná. Dbejte na to, aby se přístroj při používání nacházel v poloze, která je pro vás pohodlná.
- Při používání doporučujeme přístroj umístit mezi bederní obratle L1 a L5.
- Přístroj je doporučeno používat na tvrdém podkladu. Není-li to možné, položte pod přístroj tvrdý polštář, aby při používání ležel ve vodorovné poloze.